



medical valley

Le partenaire du thérapeute

BioStim^{2.1}



La rééducation périnéale à la portée de tous

APPAREIL DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE EN TOUTE SIMPLICITÉ



Appareil BioStim^{2.1}

Télécommande

INDICATIONS

- Rééducation post-partum
- Incontinence urinaire/ anale
- Prolapsus
- Pathologie anorectale
- Douleurs...

BÉNÉFICES THÉRAPEUTIQUES

Le stimulateur possède :

2 voies de stimulation

- Courants antalgiques (Gate Control, endorphinique).
- Excito-moteur (reprogrammation, neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire).
- Contrôle par télécommande.


2 voies de biofeedback couplées aux voies de stimulation

- Réponse de haute qualité.
- Calibrage automatique ou manuel.
- **Une voie de biofeedback pression.**


CARACTÉRISTIQUES

Un logiciel intuitif et facile d'utilisation, compatible sur MAC et PC, avec modules intégrés :


- Guide des pathologies.
- Programmes prédéfinis avec ou sans objectif.
- Bilans et suivis de grossesse.
- Planches anatomiques.
- Assistance interactive pour chaque traitement (guides visuels, placement des électrodes, principe de traitement, paramètres préconisés...).
- Une excellente visualisation des courbes : animation neutre, sphérique ou ludique.

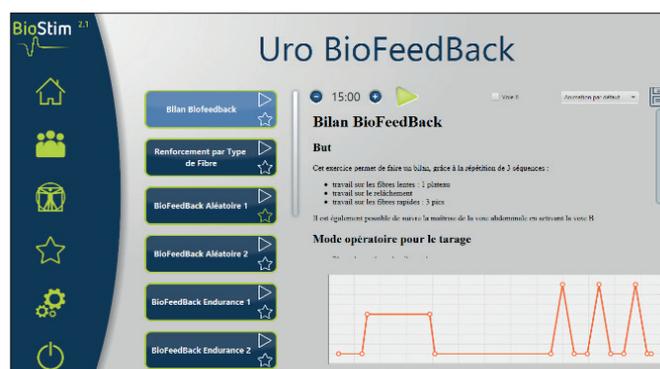

Choix du programme

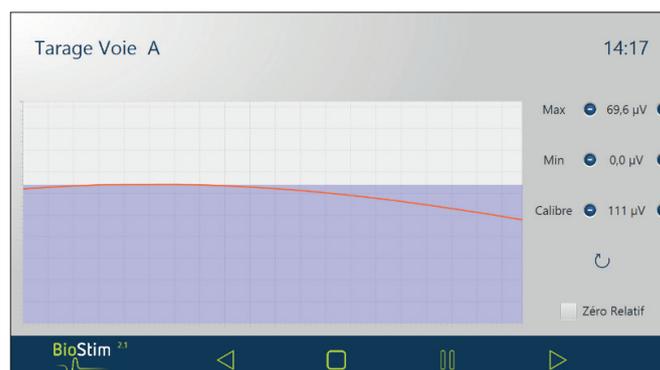

Phase de Tarage

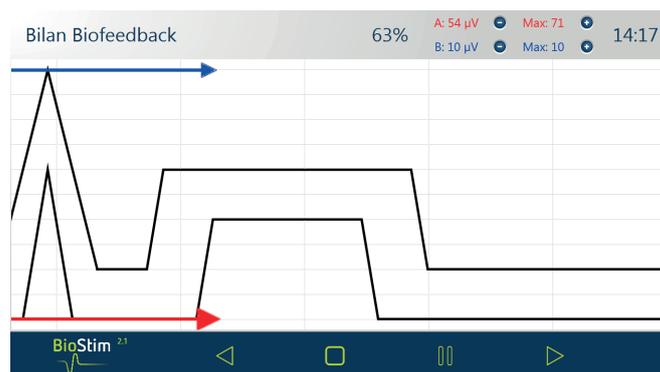

Courbe modèle avec animation

FICHE TECHNIQUE

Dimension (L x l x h)	337 x 280 x 67 mm
Poids	3,2 Kg
Alimentation	110 / 220 V/ 50 Hz
Comptabilité du logiciel	IOS et Windows (4 Go de ram)

Ordinateur vendu séparément

BIOSTIM^{2.1}

CODE ARTICLE	101209
Câble fiche banane 2 mm	✓
Câble DIN 3 pts + Adaptateur	✓
Poire d'arrêt d'urgence	✓
Sachet de 4 électrodes	✓
Télécommande	✓
Kit Pression sonde vaginale	✓
Sonde pression vaginale	en option
Sonde pression anale	en option

Appareil compatible avec toutes marques de sondes vaginales et anales.



Sébastien DENUAULT

8 rue Honoré de Balzac
37000 Tours

06 32 64 29 47
02 47 60 65 66