




# Mazet Santé



Partenaire en kinésithérapie

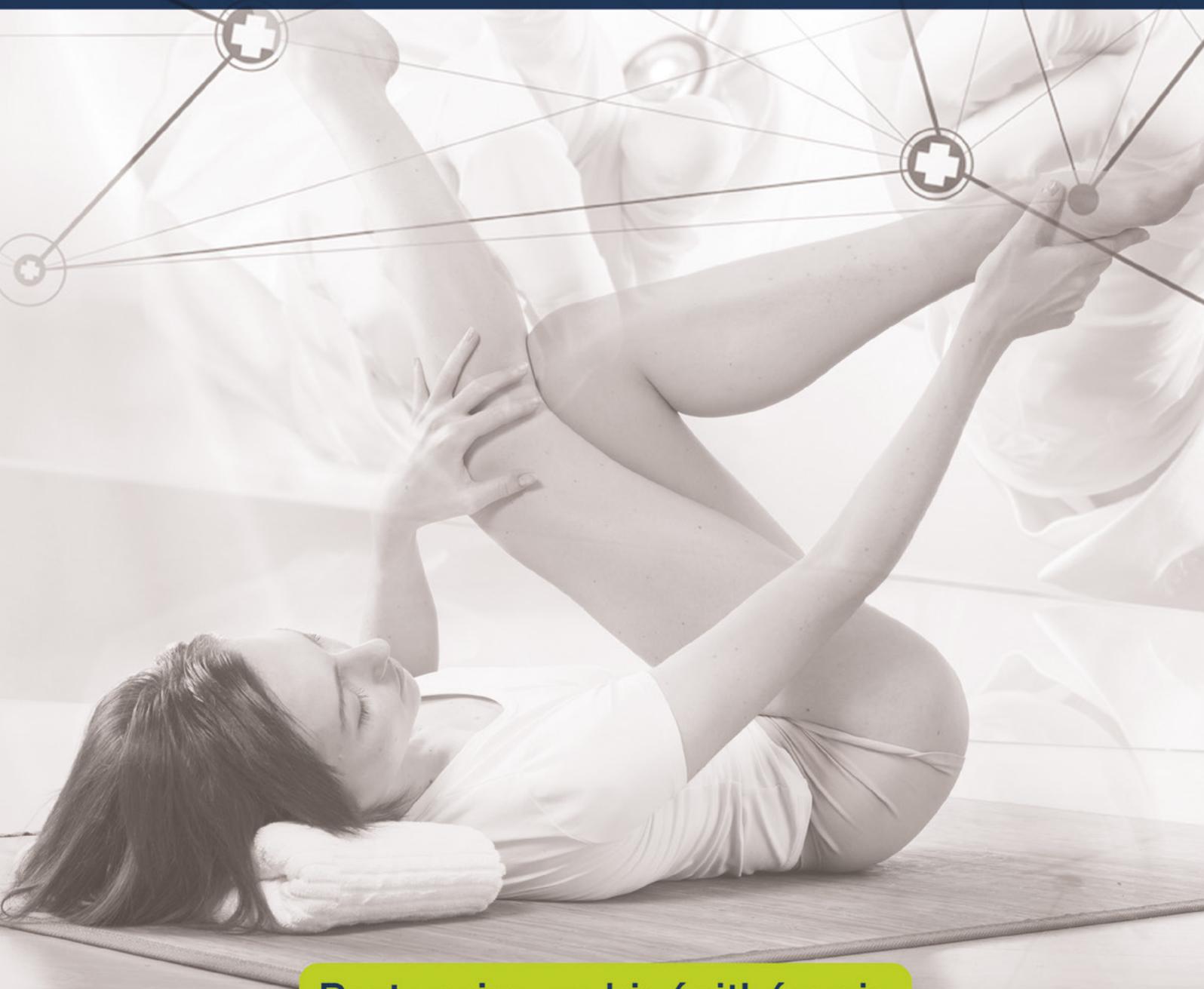

## Intérêt d'une centrale d'électrothérapie

### Une centrale d'électrothérapie pilotée par ordinateur pour tous vos besoins.

Un outil convivial pour la prise en charge de vos patients qui vous apportera une aide précieuse dans la prise de conscience du périnée grâce au biofeedback et dans le gain de tonicité.

Un logiciel complet avec plus de 50 programmes prédéfinis.

Une gamme adaptée à vos besoins et pour toutes les formations.

### Ordinateur vendu séparément.

## → INDICATIONS

- Rééducation Post Partum
- Incontinence urinaire/ anale
- Prolapsus
- Pathologie anorectale
- Douleurs ...

## Les avantages produit

- Un logiciel moderne facile d'utilisation qui vous permettra d'être le plus performant avec vos patients
- Des modules différents de biofeedback pour répondre à l'ensemble de votre patientèle
- Un mode statique ou défilement
- Des animations personnalisables
- Des protocoles de traitement prédéfinis
- Une base de donnée évolutive
- Une étape de pré réglage assistée pour toutes les séances de stimulation et de biofeedback
- Réponse de biofeedback de haute qualité
- Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback
- Une sécurité active avec un lien "appareil-patient" (poire d'arrêt d'urgence)

## Techniques

### > ANTALGIQUE


(Gate-control, endorphinique)

### > EXCITO-MOTEUR

(Reprogrammation neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire)

### > BIOFEEDBACK

(EMG, pression, décontraction)

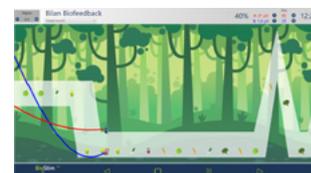

Cet appareil est disponible en 7 versions pour répondre à vos besoins et vos techniques.

Appareils		1.0	2.0	2.0+	2.1	2.1+	2.2	2.2+
	Nombre de voies de stimulation	1	2	2	2	2	2	2
	Nombre de voies de biofeedback EMG	1	2	2	2	2	2	2
	Nombre de voies de biofeedback Pression				1	1	2	2
	Télécommande				✓	✓	✓	✓
	Programmes Uro-gynécologiques	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmes Anorectaux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmes Combinés (Stimulation et biofeedback)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmes de Stimulation Motrice				✓	✓	✓	✓
	Possibilité de créer des programmes Biofeedback ou combiné			✓		✓		✓
	Fiches patients avec tableau récapitulatif des séances exportable en PDF		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Comparaison des courbes [jusqu'à 4 en même temps]			✓		✓		✓
	Module ludométrie (configurable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Biofeedback Négatif			✓		✓		✓
	Ajustement du temps de repos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ajustement du profil en cours d'exercice			✓		✓		✓
	Planches anatomiques		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Multilingue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonctionnement en réseau entre plusieurs appareils		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compatibilité Windows, iOS, Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A moins d'être Shiva,  
la déesse aux six bras,  
l'i-Press est LA solution.



## L'intérêt de la pressothérapie

**Cette méthode apporte une aide efficace dans la prise en charge de vos traitements lymphatiques.**

i-Press représente un complément unique à vos techniques manuelles. La technologie i-Press vous offre une pressothérapie séquentielle et programmable : la pression est contrôlée sur chaque cellule et les mouvements coordonnés en fonction de vos besoins s'adaptent à vos patients et à leur pathologie.



## Les bienfaits des traitements

- Traitements doux et agréables pour le patient.
- Un travail en parallèle du drainage manuel grâce à une compression spécifique différente selon les programmes recherchés (pression, cycle, rythme de travail,...).
- La pression agit sur toute la circonférence et sur une surface relativement étendue.
- Aide à la prise en charge de pathologie chronique et sévère type lymphoedème.
- L'appareil permet de faire des programmes spécifiques comparables à la physiopathologie (appel résorption, fragmentation,...).
- Une nouvelle clientèle : esthétique, relaxation, détente.

## → INDICATIONS

- **Système veineux**  
Insuffisance veineuse, varices, jambes lourdes, ulcères
- **Système lymphatique**  
Lymphoedèmes, œdèmes traumatiques
- **Esthétique**  
Détente, récupération sportive, complément des techniques d'amincissement

## Les avantages produit

- Naviguer simplement grâce à l'écran tactile couleur et à l'interface conviviale.
- Trouver toutes les pathologies en consultant les programmes préétablis élaborés en partenariat avec des praticiens renommés.
- Offrir à vos patients un traitement adapté personnalisable et enregistrable : Sélection et/ou isolement de cellules par pilotage électronique pour un traitement localisé (fini les manipulations fastidieuses) et mémoire de 20 traitements.
- Régler la séance selon vos besoins grâce à l'affichage du temps de traitement réel.
- Adapter le sens du gonflage des cellules en ascendant ou descendant.
- Optimiser vos séances avec le dégonflage actif et automatique en fin de traitement.
- Raccorder facilement, seulement 2 connecteurs pour alimenter les 10 cellules ou les 6 cellules
- Travailler avec des nouvelles bottes utilisant un matériau innovant : léger et d'une grande résistance, très confortable pour le patient.



L'i-Press travaille le fond et la forme, pour un bien être intérieur qui se voit à l'extérieur.  
l'i-Press, votre meilleur allié.

### FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (LxlxH)	34 x 32 x 14
POIDS	4,9 Kg
ALIMENTATION	230 VAC / 50 Hz
PUISSANCE	50 VA
NIVEAU SONORE	38 < l < 40 dBA
PRESSIION REGLABLE	13 à 133 mbar (10 à 100 mmHG)

### REFERENCES

102 046	i-Press 10C + bottes 10C Optimum
101 406	Manchon Optimum 7 cellules
101 091	Ceinture abdominale Optimum 5 cellules pour i-Press 10C
101 528	Hanchières 10 cellules
102 045	i-Press 6C + bottes 6C optimum
102 033	Manchon Optimum 5 cellules
102 090	Ceinture abdominale Optimum 5 cellules pour i-Press 6C
101 410	Guéridon Mazet Mobile avec potence porte-accessoires
090 001	Gaine hygiénique plastique (par 50)

### i-Press, une technologie intelligente Des programmes optimisés pour vos besoins

#### → RESORPTION

Jambes lourdes, pas de présence de varices, pas d'œdème.

#### → EFFLEURAGE

Jambes lourdes, présence de varices, obésité

#### → FRAGMENTATION

Œdème lymphatique persistant

#### → RESORPTION PERISTALTIQUE GLOBALE

Cellulite , Méthode drainage

### ACCESSOIRES



#### Bottes Optimum 10 & 6 cellules

Un bon rapport qualité-prix, plus légères, elles permettent un traitement continu sur tout le membre grâce au chevauchement des alvéoles.



#### Manchon Optimum 7 & 5 cellules

Il permet un traitement précis et confortable du membre supérieur.



#### Ceinture Optimum 5 cellules

La ceinture permet de traiter la surface abdominale. Légère et avec attache velcro pour s'adapter facilement à toutes les morphologies.



#### Hanchières (seulement disponible en 10 Cellules)

Des bottes (version XL), plus légères et plus hautes, elles permettent un traitement continu sur tout le membre, jusqu'aux hanches, grâce au chevauchement des alvéoles.



#### Guéridon avec portes accessoires

Spécialement conçu pour l'« i-Press », ce guéridon, sur roulettes, permet d'accrocher les bottes et accessoires, et possède un rangement à l'arrière.



La solution à vos traitements cicatriciels

## L'intérêt du b-Lift C

**Le recours à l'instrument permet la parfaite reproductibilité d'une manœuvre et sa constance.**

Cette technique consiste à mobiliser les tissus par l'intermédiaire d'une ventouse dans laquelle le vide est créé. Elle reproduit les diverses manœuvres de massage manuel en contrôlant l'aspiration et la taille de la ventouse. Leur effet est majoré par l'hyperhémie.

**b-Lift C vous permet des traitements optimisés pour vos patients.**

## → INDICATIONS

- Rhumatologie
- Kinésithérapie du sport
- Traumatologie
- Cicatrices\*
- Esthétique
- Massage réflexe

\* même en mode séquentiel il est déconseillé d'utiliser le b-Lift C sur les cicatrices inflammatoires (hypertrophiques et chéloïdes) et les peaux irradiées  
\* Contre-indications : peaux irradiées, dermatoses, zones infectieuses et tumorales, pathologies circulatoires, greffes et lambeaux récents

## Les bienfaits des traitements

- Drainage
- Hyperhémie, accroissement des échanges, élimination des déchets
- Assouplissement
- Décollement
- Effet défibrosant
- Effet antalgique (séquentialité)

## Les avantages produit

- Des traitements et des soins prédéfinis suivant les pathologies
- Des paramètres personnalisables pour chaque traitement
- Une mémoire pour créer vos propres programmes
- 2 modes de travail continu & mode pulsé (réglage temps & valeur vide haut et vide bas)

## FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (LxlxH)	34 x 32 x 14
POIDS	2,8 Kg
ALIMENTATION	230 VAC / 50 Hz
PUISSANCE	50 VA
DEPRESSION	Réglable 0 -900 mbar
LONGUEUR TUYAU	2 mètres

## ACCESSOIRES



Le stylet orientable et ses petites ventouses facilitera votre travail et le nettoyage. Connectique rapide et aisée pour le changement des ventouses.



Une tête palper-rouler pour vos programmes esthétique (en option).

## REFERENCES

101 725	Appareil b-Lift C avec kit 5 ventouses et stylet
101 888	Pack b-Lift C (appareil + guéridon)
101 969	Tête palper-rouler
101 903	Kit 5 ventouses
101 848	Guéridon
101 903	Kit consommable (tuyau + 3 filtres)



Une solution clé en main pour vos traitements des cervicales.

## Présentation

Pensé par un kinésithérapeute, VR cervical permet à tous d'accéder au meilleur de la technologie que ce soit en cabinet ou en centre de rééducation.

Un outil innovant pour la rééducation des pathologies rachidiennes cervicales. Il vous permet un travail efficace en toute autonomie pour vos patients, tout en contrôlant en temps réel ses capacités par des mesures précises, ainsi que son évolution dans le temps.

### → INDICATIONS

- Pathologies rachidiennes cervicales
- Vertiges
- Cervicalgies

## Les bienfaits des traitements

- Motiver vos patients dans leur rééducation avec un travail interactif
- Proposer un traitement quantifié et avec un suivi des résultats
- Séance personnalisable aux besoins du patient avec plus de 30 exercices disponibles
- Progresser dans la mobilité et diminuer la douleur grâce à un niveau de difficulté



## Les avantages produit

- Suivi et rétrocontrôle en direct des mouvements du patient
- Analyser l'évolution et les progrès de vos patients
- Travail du patient en autonomie
- Mesures précises des angulations sur les 3 mouvements de base du cou et reproductibles grâce au module bilan
- Un outil adaptable à tous les cabinets : clé en main et facilement transportable même à domicile

## INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence : Pack VR Cervical  
Ce pack contient :

- 1 malette de transport
- 1 casque de réalité virtuelle
- 1 tablette numérique
- 1 smartphone
- 1 logiciel VR CERVICAL

Poids du pack : 1.5 kg  
Aucune installation requise. Prêt à fonctionner.



# Mazet Santé



**40 ans d'expérience  
dans l'électronique médicale  
100% française.**

Mazet Santé est une marque du groupe Électronique du Mazet. Située en Haute-Loire depuis 40 ans, la société Électronique du Mazet est devenue experte en conception et fabrication de produits médicaux. Tous nos produits sont étudiés et développés en collaboration avec nos équipes d'ingénieurs et des kinésithérapeutes référents. De plus, nos produits bénéficient de la certification CE Médical 0459 et de la norme ISO 13485.



## Mazet Santé

Za Route de Tence  
43520 MAZET-SAINT-VOY – France  
Tél. +33 (0)4 71 65 02 16  
Email : [commercial@mazetsante.fr](mailto:commercial@mazetsante.fr)



Mazet Santé



Mazet Santé

[www.mazetsante.fr](http://www.mazetsante.fr)